

# マトリックス Viクッション

## 取扱説明書



**ACTION**  
JAPAN

この度は、アクションジャパン株式会社のマトリックスViクッションをご購入いただきまして、誠にありがとうございました。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。また、この「取扱説明書」はいつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

### 安全上の警告

- ⚠ 車椅子用クッションのご使用に際しては、必ず専門家（医師や看護師など）と相談の上、ご使用ください。  
また、使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、直ちに使用を止め専門家に相談してください。  
症状悪化や事故の恐れがあります。
- ⚠ 燃やしたり、火を近づけたりしないでください。
- ⚠ マトリックスViクッションは介護環境やご使用者の身体状態など、すべてのケースで床ずれ防止を保証するものではありません。万一、マトリックスViクッションをご使用中に床ずれが発生・進行したときは、すぐに医師にご相談ください。

### 梱包内容


- ◆ マトリックスViクッション（専用カバー付き）
- ◆ クッション固定用面ファスナー（マジックテープ）
- ◆ 取扱説明書

### ご使用方法

マトリックスViクッションは、圧力を最大限まで分散し、前ずれ姿勢を防ぎ安定した座位をご提供します。

1. 図1のとおり、クッションの前側と後側を確認し、車椅子においでください。
2. 臀部中央がクッションのくぼみ部分に入るようにお座りください。
3. クッション裏面には、滑り止め加工が施されていますが、不安定に感じる場合は、付属しております面ファスナーを車椅子の座面と、クッションの裏側につけて固定してください。

- ⚠ マトリックスViクッションは、必ずカバーを付けてご使用ください。  
カバーなしでのご使用は、クッション破損の大きな原因になります。

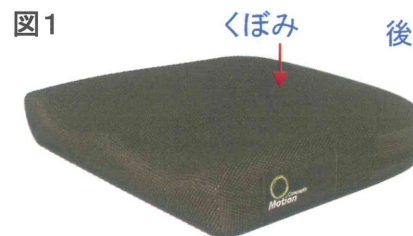

### ご使用のポイント

除圧効果を最大限に得るためには、膝の高さをクッション表面と水平になるようにフットサポートを調節し、太ももの重さがクッションにかかる（太ももとクッションの間に隙間がない）状態にします。  
フットサポートの高さを正しく調節することにより、効果的に除圧ができます。

**⚠** 車椅子の座布がたわんだ状態でのクッションのご使用は、クッションの効果が落ちる原因になります。  
また、座る姿勢が悪くなったり、体が傾いたままになってしまう危険もありますので、座布や背布がたわんだ状態の車椅子をご使用の際には、ソリッドシート等での対策をお勧めします。

### お手入れ方法

#### ◆ 外側カバー

本体からカバーを取り外し、手洗いのあと、陰干ししてください。  
また、わずかな汚れであれば、濡れタオルなどで簡単に拭き取ることができます。



#### ◆ 内側カバー

防水加工の内側カバーは、ウレタンフォームを保護するために、常に装着したままご使用ください。汚れた場合は、清拭してください。

**⚠** 外側カバーも内側カバーもチャックのついている方が後側です。

**⚠** ウレタンフォームは水分を吸収すると、本来の効果を十分に発揮できなくなりますので、くれぐれも濡らさないように注意してください。



### 仕 様

品 番	M1616VI	M1415VI
サイズ	幅40×奥40×厚8cm	幅35×奥38×厚8cm
重 量	1.3kg	1.1kg
耐荷重	136kg	136kg
素 材	〈カバー〉 ポリエステル 〈本体〉 ビスコエラストリックフォーム	